


ステレオタキシク・インジェクタ（リモートコントロール式） Legato130



装置単体

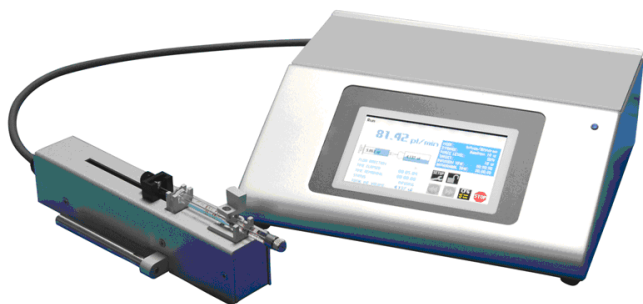

ステレオタキシクへ取付状態(フットスイッチはオプション)

Legato130 は小動物用ステレオタキシク(IMPACT-1000 など)のマニピュレータに取り付けて使用できるリモートコントロール式のステレオタキシク・インジェクタです。

主な特長

- KDS310Plus の上位機種です。精度・再現性がよりよくなり、リニアフォースが大きくなりました。
- フットスイッチインターフェースや USB ポート等多彩な接続ポートが標準搭載されています。
- コントローラを縦置き可能です。あわせてパネル表示の 90° 回転を手動で行えます。
- 0.5 - 1000ul のハミルトンシリンジを使用できます。
- 注入と吸引の両方に使用できます。
- 感圧式大型タッチパネル(4.3"パネル)で設定を行います。ゴム手袋をしたままでも操作可能です。
- ステレオタキシク IMPACT-1000 シリーズやマウス用ステレオタキシク Just for mouse、その他のステレオタキシク(一部商品を除く)に取付可能です。

※ステレオタキシクへの固定棒は直径 8mm です。他の径の場合には御相談ください

仕 様			
精度	± 0.5 %	電源	100 - 240 VAC AC アダプタ使用
再現性	± 0.05 %	重量	コントローラ約 1.5kg インジェクタ約 0.5kg
シリンジサイズ	0.5 ~ 1000 ul		
操作パネル	感圧式タッチパネル 4.3" WQVGA(400X320 dot) カラーTFT	動作環境	4~40℃, 湿度 95%以下(25℃以下の場合) ただし、結露なきこと
流速	最少 (0.5ul syringe) : 3.66 pl/min 最大 (1000ul syringe) : 3.818 ml/min	・注入、吸引どちらも使用できます ・CE, EU RoHS 対応	

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL : <https://www.muromachi.com/>

販売代理店