

フィアコンディショニング・ボックス

Fear Conditioning Box

Model MK-450



MK-450 コンディショニングボックスは居室形状及びフロアグリッド面条件の異なる ケージ各1個と条件刺激としての周波数設定可能な音源、光刺激用電源を持った条件刺激発生装置、無条件刺激としての電気刺激発生装置、及び条件刺激・無条件刺激を一定順序で一定時間呈示し、設定回数を繰り返すためのサイクルタイマで構成されます。

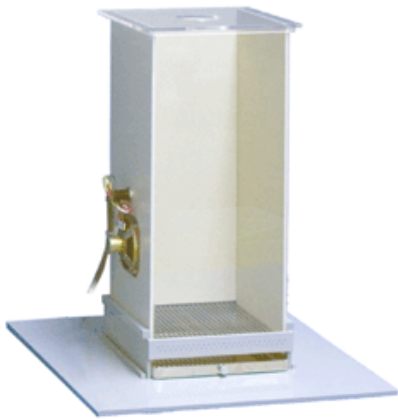
*** ビデオ・トラッキング・システム CompACT VAS/DV を使用する場合、サイクルタイマは必要ありません。**（ビデオ・トラッキング・システムの詳細は別カタログをご参照下さい）

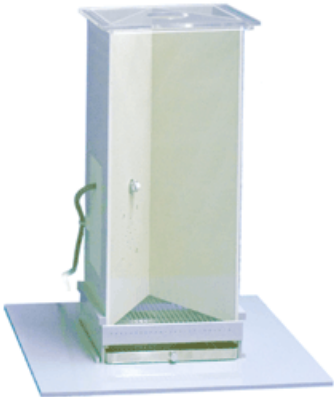
標準構成	
コンディショニングケージ MK-450SQ(ラット用またはマウス用)	1
コンディショニングケージ MK-450TR(ラット用またはマウス用)	1
ショックジェネレータ・スクランブラ SGS-003DX	1
オーディオジェネレータ AG-451	1
サイクルタイマ CBX-CT *ビデオ・トラッキング・システム使用時は必要ありません	1
DVTrack 専用インターフェース VAS-IF-USB *ビデオ・トラッキング・システム使用時に必要です	1



ビデオ・トラッキング・システム CompACT VAS/DV を使用時の設置例

仕 様

マウス用コンディショニングケージ（四角）		MK-450MSQ
	材 質	ケージ：アクリル トレイ：ステンレス
	床グリッド	ステンレス φ2mm
	床グリッド配列	平面1列型又は 上下高低差付2列型
	ベース（塩化ビニル製）	W400 × D400mm
	居 室 寸 法	W180 × D170 × H400mm
	スピーカ	8Ω 3W 84±2dB/W Foster
	ランプ	ブラケット LED 24VDC

マウス用コンディショニングケージ（三角）		MK-450MTR
	材 質	ケージ：アクリル トレイ：ステンレス
	床グリッド	ステンレス φ2mm
	床グリッド配列	平面1列型又は 上下高低差付2列型
	ベース（塩化ビニル製）	W400 × D400mm
	外形寸法	180mm 正三角形 × H400mm
	スピーカ	8Ω 3W 84±2dB/W Foster
	ランプ	ブラケット LED 24VDC

ラット用コンディショニングケージ（四角）

MK-450RSQ



材 質	ケージ:アクリル トレイ:ステンレス
床グリッド	ステンレス φ4mm
床グリッド配列	平面1列型又は 上下高低差付2列型
ベース(塩化ビニル製)	W450 × D450mm
居室寸法	W280 × D220 × H500mm
スピーカ	8Ω 5W 88dB/W Fostex
居室全体寸法・重量	W350 × D230 × H570mm 7.2kg
ランプ	ブラケット LED 24VDC

ラット用コンディショニングケージ（三角）

MK-450RTR



材 質	ケージ:アクリル トレイ:ステンレス
床グリッド	ステンレス φ4mm
床グリッド配列	平面1列型又は 上下高低差付2列型
ベース(塩化ビニル製)	W450 × D450mm
外形寸法	240mm 正三角形 × H500mm
居室全体寸法・重量	W350 × D230 × H570mm 8.7kg
スピーカ	8Ω 5W 88dB/W Fostex
ランプ	ブラケット LED 24VDC

ショックジェネレータスクランブラ SGS-003DX



出力電流設定	0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mA RMS
レ ン ジ	x1, x0.1
内蔵タイマ	0.1~99.9 秒
最大出力電圧	AC1400Vp-p 50/60Hz
外 形 寸 法	W300 × D270 × H100mm
重 量	約 5kg

オーディオジェネレータ AG-451



条件刺激1
設定方式

TONE 音
ダイヤル切替による周波数設定
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20 kHz
全 15 段階

条件刺激2

LIGHT 光 (DC24V)

押釦スイッチ

押している間出力されます。

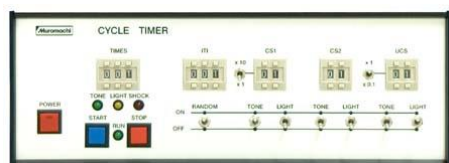
外形寸法・重量

W230 × D210 × H75mm 1.4kg

電 源

100VAC 50/60 Hz

サイクルタイマ CBX-CT



設定項目

TIMES, ITI, CS1,2 UCS

表 示

RUN, TONE, LIGHT, SHOCK

出 力(1)

オーディオジェネレータ用

出 力(2)

ショックジェネレータ用

外形寸法

W320 × D230 × H120mm

電 源

100VAC 50/60 Hz 1A

DVTrack 専用インターフェース VAS-IF-USB



RCA コネクタ白

TONE 出力

RCA コネクタ黄

LIGHT 出力,

RCA コネクタ赤

SHOCK 出力

アッフェノール 24P

フィールド・センサ接続用

8P モジュール

リモートキー接続用

USB

DVTrack 接続用

外形寸法

W160 × D120 × H40mm

重 量

280g

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL: 06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: https://www.muromachi.com/

販売代理店