


インターバル・レコーダ USBIR-4

- 自発運動量測定センサ「スーパーメックス」や「回転ケージ」と接続できます。
- 1 台のレコーダに 4 台のセンサや回転ケージが接続できます。
- ローコストで運動量測定が行えます。
- データは付属の USB メモリーに自動的に保存されます。
- データは CSV ファイル形式で保存されるので参照は簡単です。



【構成例】
インターバル・レコーダ
ファスト・トラック
回転ケージ FT-713

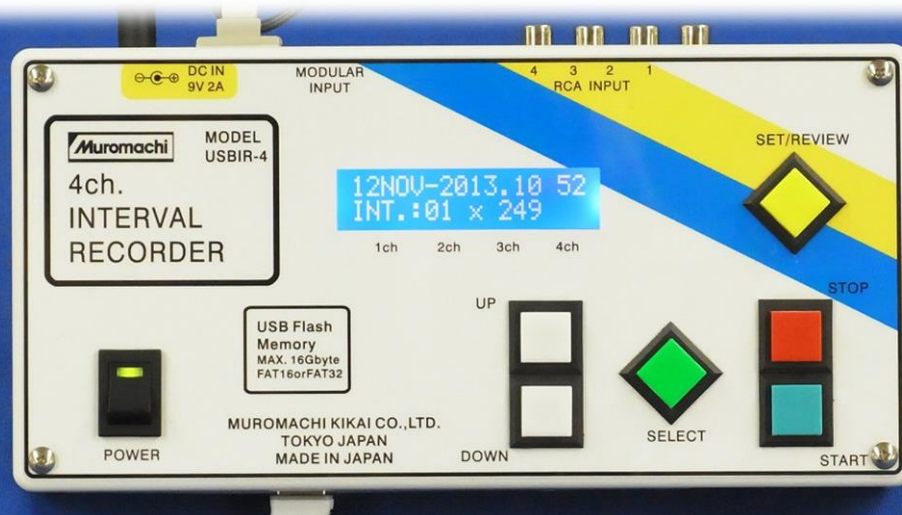

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

【構成例】

インターバル・レコーダ
スーパーメックス・センサ
パワーユニット



【特 長】

- ・回転ケージの回転数、スーパーメックスのカウント数が簡単に取得できます。
専用ソフトウェアは使用しません。
- ・4ch 同時スタートです。
- ・実験中に USB メモリーを外して、データ参照を行えます。
注）データ書き込み中の取り外しは絶対に止めて下さい。
- ・USB メモリーを外さなくても、10 回分のデータは液晶上で確認できます。
- ・本体の裏側にマグネットが付いているので、マグネットが利く金属に設置が可能です。
- ・電源ケーブルの抜け防止用ケーブルクランプが付いています。

【仕 様】

- ・測定間隔：1, 5, 10, 30, 60 (min) からの選択
- ・データ取込回数：1～255 回 *上記、いずれの測定間隔でも同様
- ・入力信号：接点信号 4ch
- ・電 源：スイッチング AC アダプタ DC 9V 2A
- ・消費電力：通常時 5W 以下
- ・外 寸：220×110×H60mm
- ・重 量：約 500g

【関連商品】



カウンターユニット FTC-01



カウンターユニット&ファストトラック

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL: 06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

2020.01.01

販売代理店