


# HSE 社製 マウス用レスピレータ”ミニベント” Type 845

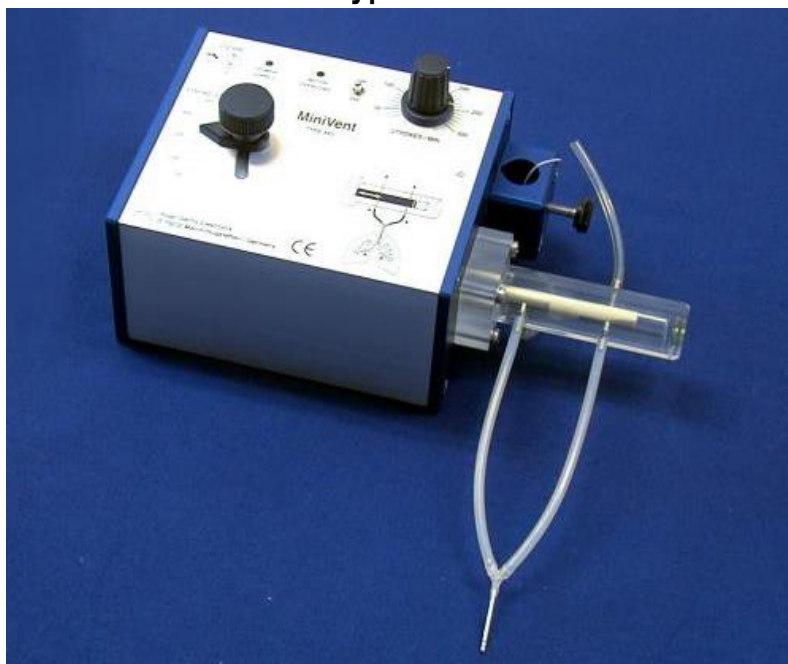

## 概 要

本装置はマウス専用に特別に開発されたレスピレータでマウスに適した換気量と呼吸数を設定することができます。ミニベントを使えば Hyperventilation や Hypoventilation となる危険性を回避することができます。スターリング原理に基づいたコンパクトな定量型で、従来のレスピレータと異なり外部コントロールを必要とするバルブの代わりにロータリー・プランジャを採用しています。このプランジャは運転中に前進運動と回転運動を一定間隔で繰り返します。

## 主な特長

| 仕 様   |                       |
|-------|-----------------------|
| 換 気 量 | 30 - 350 $\mu$ l 連続可変 |
| 呼 吸 数 | 60 - 400 回/分          |
| 外形寸法  | W100 × D200 × H80mm   |
| 重 量   | 約 1kg                 |
| 電 源   | 専用電源アダプタ              |

- 換気量は 30 - 350 $\mu$ l の範囲で設定できます。
- 呼吸数は 60 - 400 回/分の範囲で設定できます。
- 換気量は運転中でも簡単に調節できます。
- ピストンにはバルブを使用しておりませんので、バルブつまりは起こりません。
- デッドスペースが小さく且つ一定です。
- コンパクトに設計されており、動物のすぐそばに設置できます。
- 音が静かです。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**  
**室 町 機 械 株 式 会 社**

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444  
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL: 06-6302-1277  
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750  
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店