


8方向放射状迷路

RM-08(ラット用), RM-08A(ラット用センサ付)

RM-08M(マウス用)

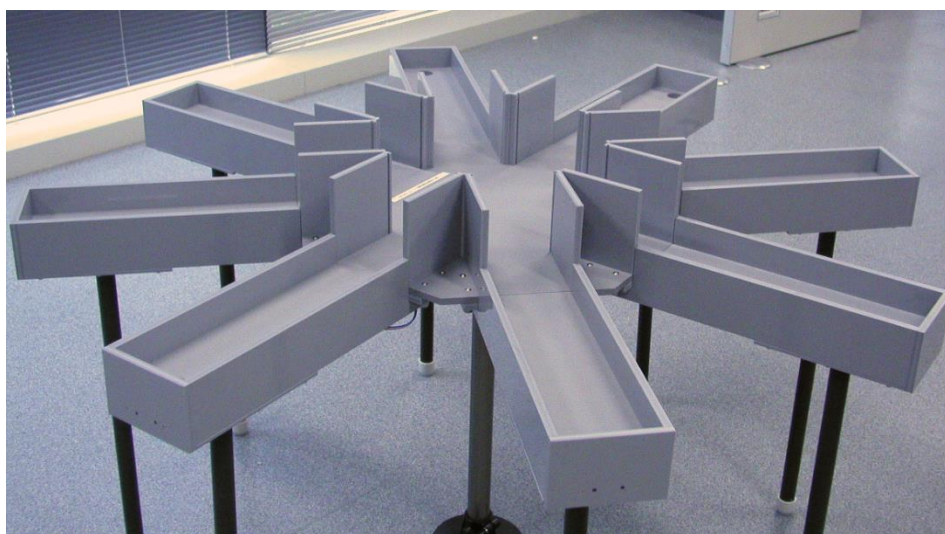

(写真はラット用)

8方向放射状迷路 RM-08A、RM-08 および RM-08M はラット・マウスの記憶学習に用いられる迷路の一つです。空間認知により餌の場所を覚え、試行を重ねると餌獲得までの時間短縮や餌獲得効率が上がります。本装置は高架式であり、ホーム部、アーム部8本及び、それぞれのスタンド部に分解可能な組立型迷路です。各アーム部の先端部にはペレット状の餌を置くための窪みが設けられており、特に RM-08A にはビデオ・トラッキング・システム CompACT VAS シリーズと併用して、ラット・マウスの餌獲得を自動判定するためのセンサが内蔵されています。

歩行面には滑りにくく、歩行に適したカイダック加工を施した素材を使用しており、ラット・マウスにやさしい環境を提供します。さらに実験用スタートドーム及び、未使用アームへの進入を防ぐギロチンドアが標準で付属しています。

仕 様	
材 質	塩化ビニル（グレー色）組立型 歩行面：塩化ビニル製カイダック
外 形 寸 法	ラット用：W1334×D1334×H650mm マウス用：W920×D920×H650mm
迷 路 部 寸 法	ホーム区画幅：314 mm(ラット)、200 mm(マウス) アーム幅：110 mm(ラット)、70 mm (マウス) アーム長：500 mm(ラット)、350mm (マウス)
センサ（RM-08A のみ）	フォトランジスター（パッシブ型） LED モニタ、感度調整用ポテンションメータ付き

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店