

電磁ロック付電子薬品庫/電子鍵ボックス管理システム



保管庫の開閉情報を Catch & Control

コントローラ1台で、最大20チャンネルの鍵ボックス・薬品庫・保管庫・冷蔵庫などの電子鍵による開閉管理が可能



5列引き出し式電子薬品庫



電子ロック鍵ボックス




後付電子ロック



既存薬品庫取り付け例

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.

<構成例>

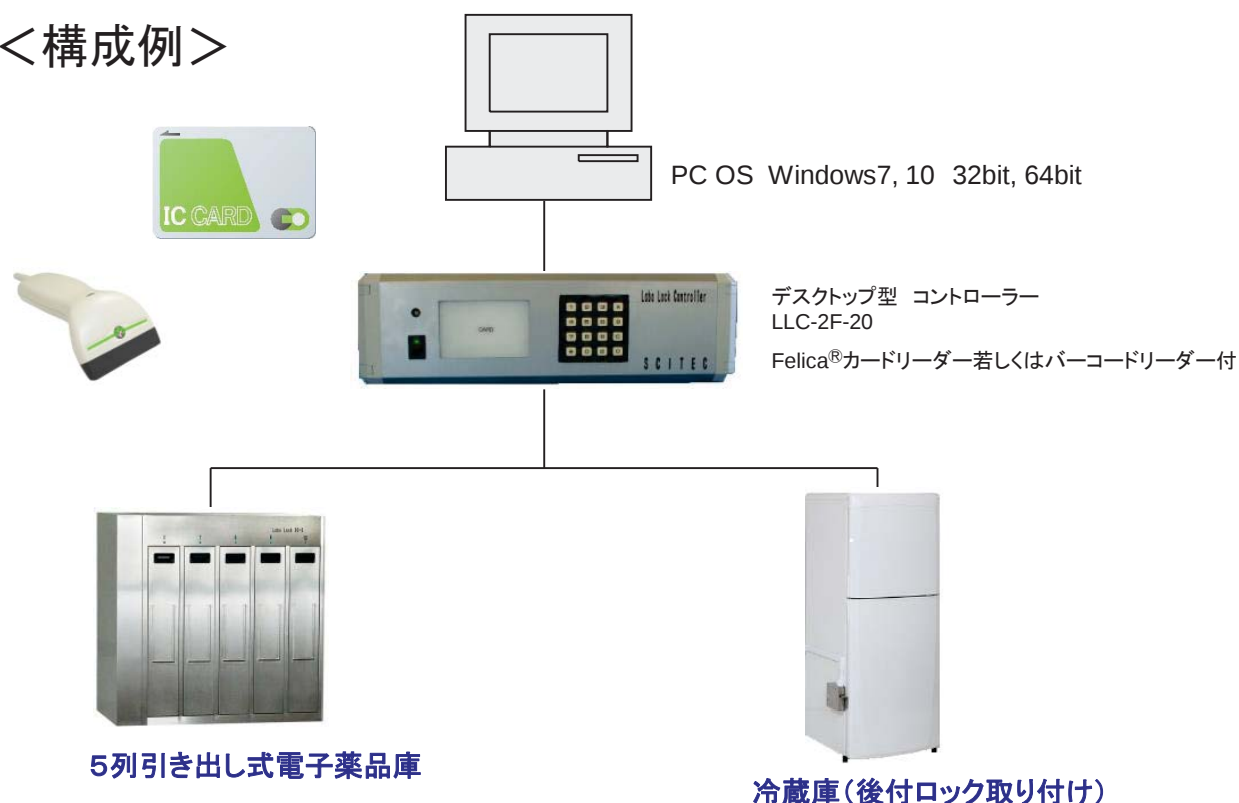

使用者ごとの電子鍵による開錠権限設定可能

個人認証はRFIDカード(FeliCa®カード)、バーコードのどちらかを選択できます。
設定した鍵は、権限の範囲内で全て開錠もしくは、開錠するチャンネルを選ぶこともできます。

開錠・施錠の履歴管理

開錠、施錠の履歴はコントローラー内部に記録され、必要に応じてPCと接続して確認ができます。

日付検索
いつから 2016/03/09 15
いつまで 2016/03/09 15

接続機器検索
接続機器

使用者名検索
使用者名

検索 クリア 閉じる

履歴検索画面

停電中や非常時でも安心手動解除

停電や非常時の場合には、セキュリティ鍵を使用して手動で開錠できます。



新規はもちろんお手持ちの保管庫(薬品庫、冷蔵庫)の 電子ロック化が可能です

後付で電子ロックを取り付けることができます。

後付電子ロック (観音扉薬品庫取り付け用)



後付電子ロック (片開き薬品庫取り付け用)



後付け電子ロック 観音扉薬品庫取り付け用

形 式	EL-1
外 形 寸 法	W105 x D42 x H84 mm
材 質	スチール焼付け塗装仕上げ
通 信	専用ケーブル
付 属 品	非常鍵 1個

後付け電子ロック 片開き扉薬品庫取り付け用

形 式	EL-2
外 形 寸 法	W110 x D30 x H110 mm
材 質	スチール焼付け塗装仕上げ
通 信	専用ケーブル
付 属 品	非常鍵 1個



観音扉取り付け例
(EL-1使用)



既存薬品庫取り付け例
(EL-2使用)




冷蔵庫取り付け例
(EL-2使用)

製品情報

PC認証版・LaboLock- I シリーズ

PCから認証、開錠を行います。

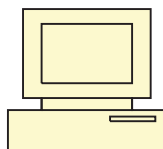

PC OS : Windows7,10 32bit
コントローラー付属のアプリケーションソフト
SecukeyLock-PCをインストールします。



デスクトップ型 コントローラー
LLC-1-20



薬品管理システムの端末として使用できます。
(接続できるシステムはお問い合わせください。)

スタンドアローン版・LaboLock- II シリーズ

常時コントローラーはPCとの接続はしません。
権限設定や履歴管理時に接続します。



PC OS Windows7,10 32bit, 64bit
コントローラー付属のアプリケーションソフト
LaboLockmanager- II をインストールします

認証はコントローラーで行ないます。



デスクトップ型 コントローラー
LLC-2F-20
Felica®カードリーダー若しくはバーコードリーダー付



電子ロックコントローラー (PC認証タイプ)



LLC-1-20

電子ロックコントローラー (スタンドアロンタイプ)



LLC-2F-20

* 画像はFeliCa®仕様


電子ロックコントローラー (PC認証タイプ)

形 式	LLC-1-20
制御CH数	20
材 質	アルミ製
外形寸法	W350 x D250 x H100 mm
重 量	約 2.0 kg
通 信	LAN or RS232C
電 源	100VAC 2A
付 属 品	電源ケーブル 2m x 1本

ラボロックコントローラー LLC-1-20には、
PCソフト SecukeyLock-PCが付属します。

PCソフト SecukeyLock-PC

対 応 OS	Windows7, 10 32bit
認 証 方 式	FeliCa®, 指紋認証

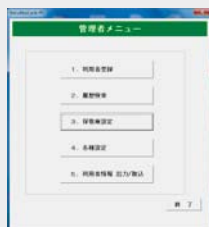

電子ロックコントローラー (スタンドアロンタイプ)

形 式	LLC-2F-20
認 証 方 式	FeliCa®
形 式	LLC-2B-20
認 証 方 式	バーコード



制御CH数	20
材 質	アルミ製
外形寸法	W350 x D250 x H100 mm
重 量	約 2.0 kg
通 信	LAN or RS232C
電 源	100VAC 2A
付 属 品	電源ケーブル 2m x 1本

ラボロックコントローラー LLC-2(F, B)-20には、
PCソフト LaboLock manager-Ⅱが付属します。

5列引き出し式薬品庫 (コントローラー内蔵タイプ)



5列引き出し式薬品庫 (コントローラー内蔵タイプ)

形 式	SC-5MF (認証方式:FeliCa®)
形 式	SC-5MB (認証方式:バーコード)
材 質	SUS-304
外 形 寸 法	W920 x D600 x H900 mm
試 薬 瓶 数	75本(500ml) or 40本(1L)
収 納 本 数	
引 出 棚	10 kg
耐 荷 重	約 60 kg
通 信	LAN or RS-232C
電 源	100VAC 2A
付 属 品	トレー 15個 縦仕切り棒 30本 横仕切り板 60個 非常鍵 1個 床固定金具・上下連結金具 1組 電源ケーブル 2m 1本

5列引き出し式薬品庫 (増設用)



5列引き出し式薬品庫 (増設用)

形 式	SC-5S
材 質	SUS-304
外 形 寸 法	W920 x D600 x H900 mm
試 薬 瓶 数	75本(500ml) or 40本(1L)
収 納 本 数	
引 出 棚	10 kg
耐 荷 重	約 55 kg
通 信	専用ケーブル
付 属 品	トレー 15個 縦仕切り棒 30本 横仕切り板 60個 非常鍵 1個 床固定金具・上下連結金具 1組

* 増設用はコントローラーを内蔵していません。

ガロン瓶用薬品庫 (増設用)



ガロン瓶用薬品庫(増設用)

形 式	GC-2S
材 質	SUS-304
外 形 寸 法	W500 x D600 x H900 mm
ガ ロ ン 瓶 数	12本(2段合計)
収 納 本 数	
引 出 棚	15 kg
耐 荷 重	約 30 kg
通 信	専用ケーブル
付 属 品	非常鍵 1個、床固定金具・上下連結金具 1組

* 増設用はコントローラーを内蔵していません。

電子ロック鍵ボックス (コントローラー内蔵タイプ)



KBFM-2F-20

* 画像はFeliCa®仕様

電子ロック鍵ボックス (増設用)



電子ロック鍵ボックス (コントローラー内蔵タイプ)

形 式	KBFM-2F-12	KBFM-2F-20
	認証方式: FeliCa®	
形 式	KBFM-2B-12	KBFM-2B-20
	認証方式: バーコード	
収 納 鍵 数	12本(KBFM-12)	20本(KBFM-20)
材 質	スチール耐薬品性灰色塗装	
外 形 寸 法	W485 x D190 x H370 mm	
重 量	約 10.5kg	
通 信	LAN or RS-232C	
電 源	100VAC 2A	
付 属 品	チェーンキャッチ CC-3	
	12個(KBFM-12)	20個(KBFM-20)
	ネームホルダー	
	12個(KBFM-12)	20個(KBFM-20)
	非常鍵 1個	
	電源ケーブル 2m 1本	

電子ロック鍵ボックス (増設用)

形 式	KBF-12	KBF-20
収 納 鍵 数	12本(KBF-12)	20本(KBF-20)
材 質	スチール耐薬品性灰色塗装	
外 形 寸 法	W485 x D190 x H370 mm	
重 量	約 10.5kg	
通 信	専用ケーブル	
付 属 品	チェーンキャッチ CC-3	
	12個(KBF-12)	20個(KBF-20)
	ネームホルダー	
	12個(KBF-12)	20個(KBF-20)
	非常鍵 1個	

* 増設用はコントローラーを内蔵していません。

FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。
FeliCa®は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: https://www.muromachi.com/

2020.01.01

< 製造元 >

株式会社サイテック

〒422-8058 静岡市駿河区中原743-1