


Ugo Basile 社製 Isolated Organ Baths

1ch システム Cat. No. 4000

2ch システム Cat. No. 4050

4ch システム Cat. No. 4400

TISSUE BATHS

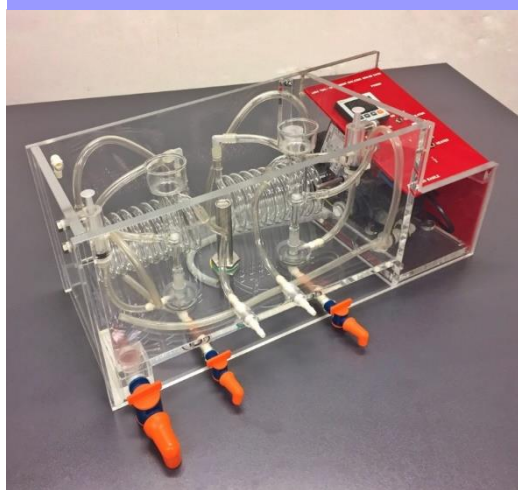

アイソレートオーガンバスは、等尺性または等張性の組織の収縮/緩みを正確に記録するために設計されています。

1、2、4chのturn-keyシステム(4000、4050、4400)として利用可能で、1960年代から世界中の古典的な薬理学の研究と教育に使用されています。

平滑筋、子宮、気管、血管片、耳介などに対する電気刺激または薬物の影響を含む研究は、最適な条件下で行うことができます。

洗浄またはテスト溶液は、温度平衡コイルとシリンジバルブを通過した後、チャンバーに入ります。チャンバー内の組織は、オーバーフロー排管を通してチャンバーをフラッシュすることにより洗浄され、組織が空気に曝されるのを防ぎます。

水の攪拌は、遠心ポンプによって送られるウォータージェットによって行われます。

200Wステンレス鋼の発熱体は、アクリル容器床に取り付けられています。

正確なsolid state "proportional"サーモスタットは、すべてのモデルで $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ の優れた制限内で温度を維持します。

特 徴

- ・ 透明アクリルで見やすい構造
- ・ 1つのbath内で加熱、循環、トランスデューサーマウント
- ・ トランスデューサー、チャンバー、アクセサリーの豊富な選択肢

電源 : 115 or 230 V, 50/60 Hz, 250 Watt max. (4000 / 4050) 400VA max for 4400

温度 : $25-45^{\circ}\text{C}$ in 0.1°C steps (精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)

サウンドレベル : 70dB以下

寸法 : 32x20x22cm (#4000)

重量 : 4Kg



外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店