

小動物用体温コントロールシステム

Rodent Warmer System



本装置は小動物の手術中など、麻酔下における小動物の体温の低下を防ぐ為の体温コントロールシステムです。

ヒータリングパッド1個を制御する1chコントローラとパッド2個を同時制御する2chコントローラがあり、ご使用環境に合わせてお使いいただけます。

オプションの直腸温プローブを使用することにより、動物の体温をモニタしてフィードバック管理することも可能です。

また、Stoelting社Warmer内蔵型ステレオタキシックの制御を行うことも可能です。

Temperature Control Range	25-45°C
Temperature Resolution	0.1°C

● Rodent Warmer X1 型式:53800

1ch コントローラ



- ダイヤル式コントロールで簡単に設定可能
- 直腸温プローブ(オプション)が使用可能
- 小型・軽量



● Rodent Warmer X2 型式:53850


2ch コントローラ



- 2個のパッドを別々に設定・制御が可能
- タッチパネルで簡単に操作可能
- 直腸温プローブ(オプション)が使用可能
- ラット用パッドとマウス用パッドなど種類の違う物でも制御可能




*ヒータリングパッド1個でもご使用可能です。

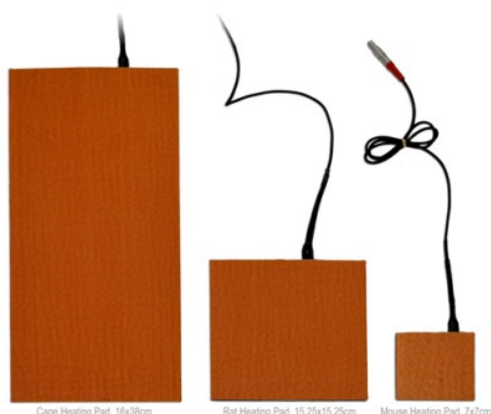

ヒーティングパッドは3種類ご用意
WarmerX1,X2共用です。

ヒーティングパッド	サイズ
Mouse用	7 x 7cm
Rat用	15.25 x 15.25cm
Cage用	16 x 38cm

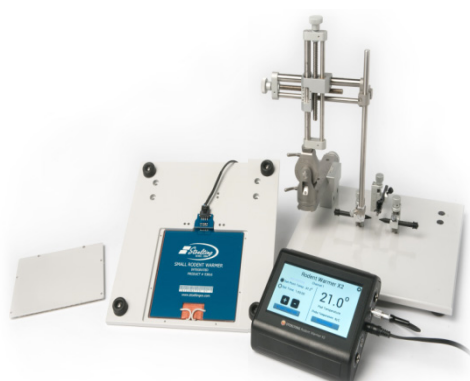

Stoelting社 新型ステレオタキシク (Warming Base)

ステレオタキシクのベースプレートの中にヒーティングパッド
が内蔵されております。
WarmerX1,X2いずれかのコントローラをご用意いただくだけで
ヒーティングオプションがご使用いただけます。

1chシステム Rodent Warmer X1

53800M	Rodent Warmer X1 + Mouse用ヒーティングパッド
53800R	Rodent Warmer X1 + Rat用ヒーティングパッド
53800C	Rodent Warmer X1 + Cage用ヒーティングパッド
50304	直腸温プローブ

2chシステム Rodent Warmer X2

53850-MM	Rodent Warmer X2 + Mouse用ヒーティングパッド
53850-RR	Rodent Warmer X2 + Rat用ヒーティングパッド
53850-CC	Rodent Warmer X2 + Cage用ヒーティングパッド
50304	直腸温プローブ

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店