


OECD 方式 ラット・マウス用握力測定装置

MK-380CM/R

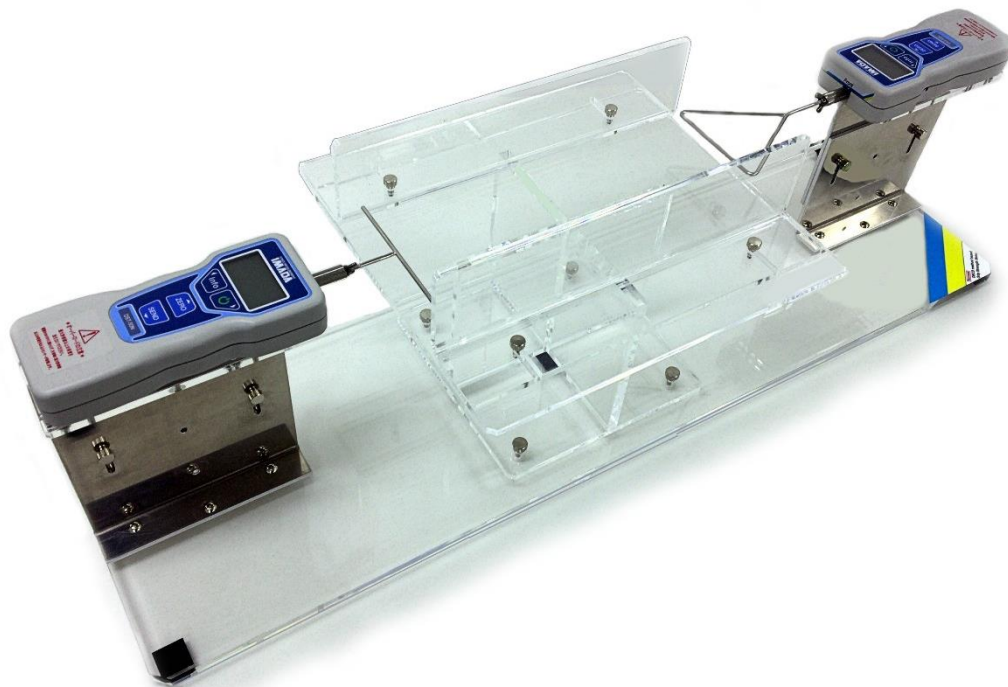


本装置は、哺乳類の生殖毒性試験およびその評価の OECD テストガイドラインである【OECD Environment, Health and Safety Publications Series on Testing and Assessment No. 43】に握力測定法として明記されている Meyer et al (1979)の方法を参考に作成した前後肢握力測定装置です。測定には高精度のデジタルフォースゲージを使用しており、精度の高い数値を表示し動物の最大握力を測定することができます。また、USB 出力ポートが標準装備されており、得られたデータを PC に転送することができます。(ソフトウェア：オプション)

仕様


表 示 部	符号付き 4 桁
検 出 器	ロードセル
計 測 単 位	kg , N
最大計測範囲	5kg, 50N
読 取 限 度	0.001kg, 0.01N
データメモリ機能	フォースゲージ本体に、1000 件のデータ保存が可能
前後肢測定バー	OECD 方式ステンレスバー、ステンレス網
使 用 電 源	5VDC 1.0A AC アダプタ 充電式
外 形 寸 法	W230mm × D810mm × H240mm
重 量	約 6kg

特徴

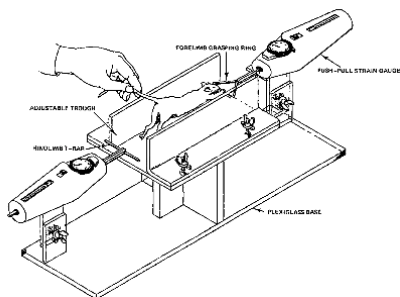


OECD 準拠方式

OECD テストガイドラインで握力測定法として明記されている Meyer et al (1979)の方法に基づき作成された装置です。

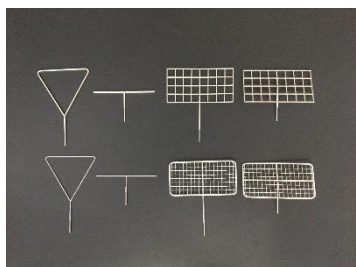

測定用バー

OECD 方式用の測定用バー以外に簡便に測定できる測定用網も標準装備されています。

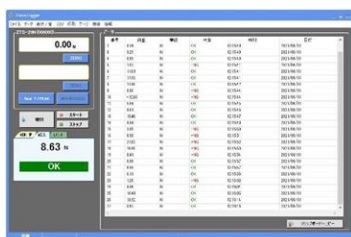

データ通信

得られたデータを PC に転送することができます。
(データ受信ソフトウェア:オプション)

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所:〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
E-mail: sales@muromachi.com URL <http://www.muromachi.com/>

販売代理店